



DACS teamplay – Simplifiez la gestion de votre dosimétrie

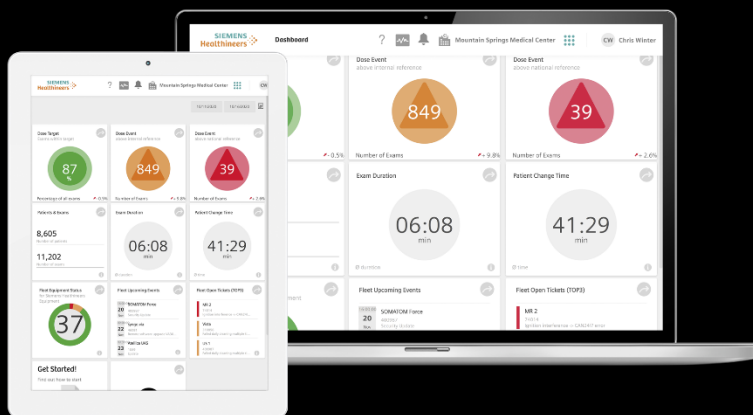

teamplay pour votre analyse de dose

teamplay permet aux professionnels de santé, hôpitaux et établissements d'enseignement supérieur de collaborer dans le but d'améliorer les résultats cliniques et la qualité des soins alloués aux patients. Cette solution cloud donne un aperçu clair de la dose délivrée, des déviations et leurs origines afin de vous conformer aux réglementations sur la dose.

L'application teamplay Dose communique avec vos modalités, PACS ou RIS afin de vous fournir une vue transparente sur vos niveaux de dose en temps réel. Analysez la dose remontée par vos diverses modalités (CT, MG, NM, PT, XR) tous fournisseurs confondus et identifiez les causes dépassement.

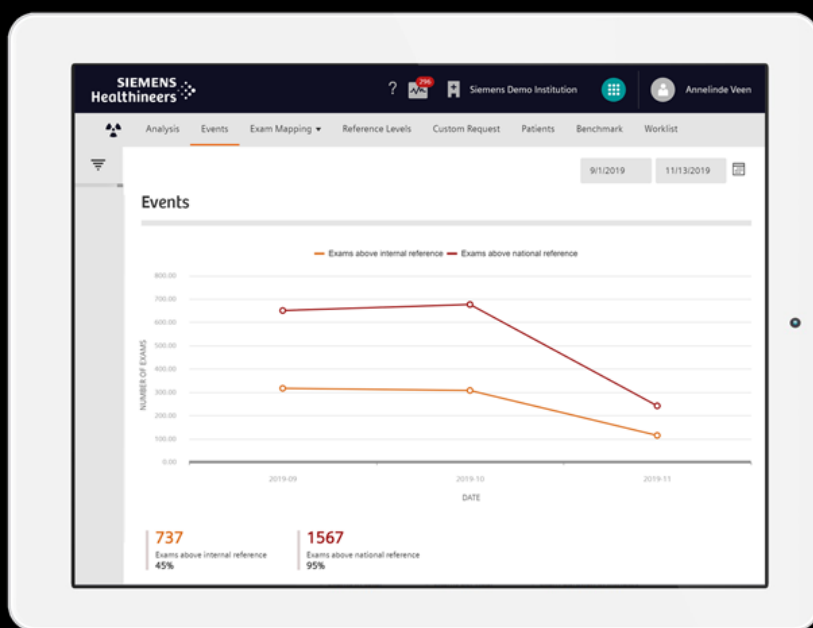

Se conformer aux règlementations sur la dose

Comment assurer la qualité du processus de surveillance de dose au sein de votre établissement ?



Identifier les causes de déviations


Comment identifier les causes de dépassement de dose dans vos protocoles de scanners afin de réduire le taux d'exposition aux rayonnements ionisants ?

1. Prise en charge du patient




- Historique dosimétrique patient : dossier dosimétrique, dose effective cumulée, dose à l'organe, dose à la peau.
- Gestion des spécificités patients : dose selon la morphologie du patient (SSDE et WED pour CT et NM) et son âge.
- Gestion des données pédiatriques grâce à de nombreux filtres et aux niveaux de références (seuils d'alerte paramétrables et NRD).

2. Information en temps réel

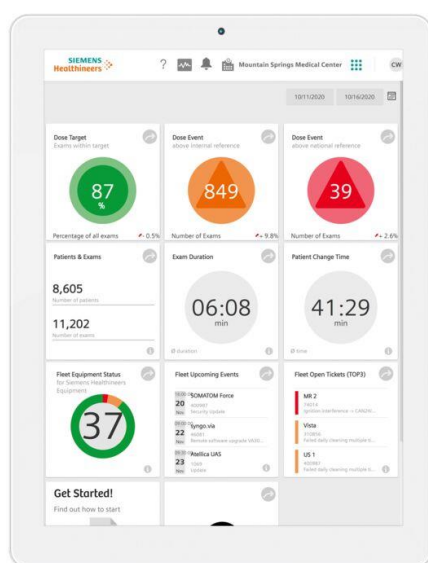

- Seuils d'alertes - deux niveaux d'alertes possibles :
 - Seuils locaux paramétrables par modalités.
 - Seuils nationaux (NRD) automatiques.
- Paramétrage du seuil local : multicritères et multimodalités.
- Affichage des alertes : affichage en temps réel sur le tableau de bord et envoi de rapports journaliers par mail.
- Justification des alertes : possibilité de justifier un dépassement de dose.
- Accès à votre liste de travail : suivi de vos examens en détails et ajout de commentaires.

3. Analyse des données en toute flexibilité

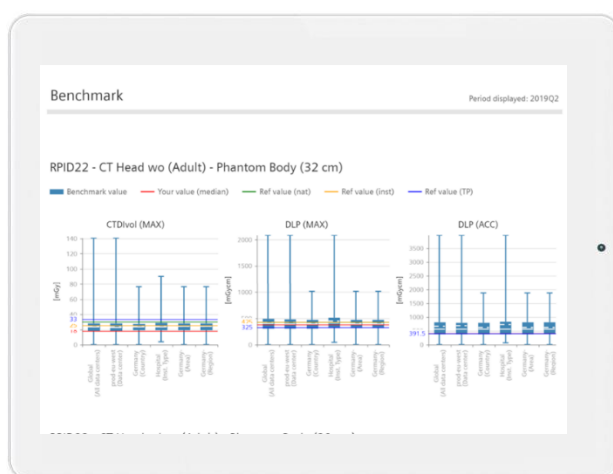

- Statistiques prédéfinies – de nombreux filtres disponibles pour une analyse poussée de la dose
- Benchmark – Comparaison de votre activité dosimétrique avec d'autres établissements anonymisés
- Requêtes sur les données – Sauvegarde de vos combinaisons de filtres personnalisées
- Export des données – Analyse approfondie et export des NRD pour l'IRSN

Pour vous inscrire et obtenir plus d'informations sur teamplay, rendez-vous sur le site :

 <https://teamplay.siemens.com/>

(1) Les prérequis incluent : connexion sans fil au réseau clinique, minimum de prérequis matériels, conformité avec les réglementations locales sur la sécurité des données.

(2) teamplay Protocoles est compatible avec une liste de scanners Siemens. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Siemens.

Siemens Healthineers
Headquarter Siemens Healthcare GmbH Henkestr. 127
91052 Erlangen, Allemagne
Phone: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com
CC SVDS
Siemens Healthcare GmbH, 2020.
Tous droits réservés.